

NOWOŚĆ


Laboratoryjna mieszarka do mma z pogrzewaną misą




eco
friendly

MODEL
NR KATALOGOWY

HYJB-30

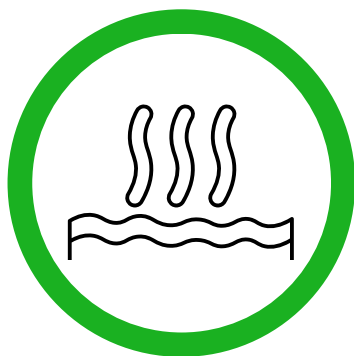

**PODGRZEWANA
MISA**

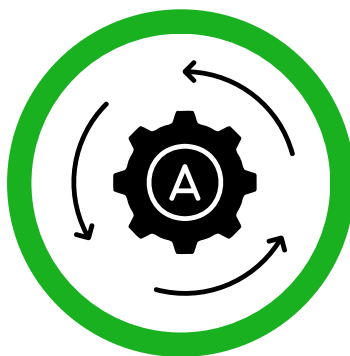

**AUTOMATYCZNY
CYKL MIESZANIA**



**EKRAN
DOTYKOWY**

Mieszalnik laboratoryjny do asfaltu to urządzenie używane do laboratoryjnego przygotowywania mieszanki asfaltowej, spełnia normę EN 12697-35. Proces mieszania jest bardzo skuteczny, a przygotowanie próbki zajmuje niespełna 5 minut. Temperaturę można ustawić dowolnie między temperaturą pokojową a 250°C, co spełnia wymagania temperaturowe mieszania na zimno, mieszania na ciepło i mieszania na gorąco. Podczas procesu mieszania czujnik temperatury jest monitorowany w czasie rzeczywistym, a dokładność kontroli temperatury wynosi $\pm 1^\circ\text{C}$. Prędkość mieszania można regulować w celu dostosowania do mieszanki różnych kruszyw i różnych modyfikowanych asfaltów. Po zakończeniu mieszania nastąpi automatyczne rozładowanie



KONTAKT
morek@multiserw-morek.pl

**MULTISERW
MOREK**

Charakterystyka techniczna

Regulacja temperatury +/- 5C powyżej temperatury otoczenia do 250C	Prędkość obrotowa -regulowana 0-35 obr/min	Pojemność misy 30 l
Dokładność temperatury +/- 1C	Czas pracy 0 - 9999s	Dokładność czasu pracy +/- 1s
Duży wyświetlacz TFT Dotykowy ekran z możliwością obserwacji cyklu mieszania w czasie rzeczywistym	Waga netto 300kg	Wymiary (dł x szer x wys) 1350×550×980mm
Układ misy poziomy	Rodzaj mieszadła poziome / wstęgowe	Zasilanie 400V, 50Hz

Akcesoria dodatkowo płatne
Zapasowa łopatką mieszadła

